

Le piano テヌート取扱説明書

ル・ピアノシリーズ

ハリツヤ、
エイジングケア

各 部 名 称

<表>

<裏>


キャップ

ヘッド

電源ランプ

電源スイッチ


アース

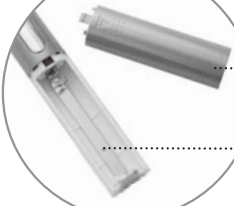


電池カバー

電池ケース

電池の入れ方

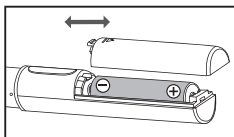

1.電池カバーをスライドさせながら開けて下さい。

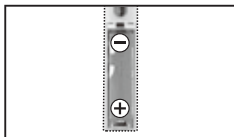

2.単三電池をプラス側、マイナス側の向きを確認し挿入してください。

3.電池カバーを元にもどしてください。

使用方法



1.電源スイッチを上へ押し上げる。



2.アースを握りながら使用します。(詳しい使用方法は別紙参照)

使用上の注意

洗顔後(化粧を落とした状態)、お手持ちの化粧水またはゲル等で十分に潤してから使用してください。
顔を潤した後の手は必ず拭いてからご使用下さい。
ビリビリと強い痛みを感じる場合は、お手持ちの化粧水またはゲル等を通常より多めにご使用することをお勧めします。
※それでも痛みを感じる場合は使用を中止してください。

お手入れ方法

使用後はやわらかい布やティッシュなどで拭き取り清潔に保管して下さい。
※水洗いはしないで下さい。
※アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などを使用しないで下さい。故障や部品の割れ変色などの原因になります。

仕 様

電源方式:

単3形電池1本(別売)

商品サイズ:

長さ約13.2×直径1.7cm(キャップ含む)

商品重量:

約23g(電池除く・キャップ含む)

素材:ABS樹脂/クロムメッキ

Le piano ル・ピアノシリーズ



本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保障内容にて無料修理をさせて頂くことをお約束するものです。修理・交換に際しましては必ず保証書をご提示下さい。詳細は下記保証規定をご参照下さい。

※保証書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

保 証 規 定

- 取扱説明書の記事内容に従った正常な使用状態で保証期限内に故障した場合、ご購入から一年以内は無償で修理・交換いたします。
- 修理ご依頼品の発送料および諸経費はお客様のご負担になります。※ご郵送される場合、傷が付かないように柔らかい紙や布で包んでダンボール箱に入れて下さい。
- 保証期間中はお買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参下さい。保証の規程に従って修理させていただきます。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - 本誌の提示がない場合、または本誌にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障および損傷
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 使用中に生じたキズ、汚れ等外観上の変化
 - 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧、盗難等による故障および損傷
 - 落下等不注意、ならびに乱暴な扱いによる故障、損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
 - 一般家庭以外(たとえば業務用等)に使用された場合の故障および損傷
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。



販売元
株式会社ヴァルテクス

東京都渋谷区広尾1-1-39
お客様相談係 03-6418-1114

保 証 書

製品名	保証期間	お名前	ご購入年月日より1年間	様	ご購入年月日	お買上げ店名	日	月	年
		ご住所		〒					
電話番号				()					

以下の場合、保証書および品質保証規程は無効となり、適用されません。
・保証書の提示がない場合 ・記入漏れのある場合 ・保証書を改ざんした場合

■ 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、貴方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守って下さい。

- ⚠ 危険：**この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
- ⚠ 警告：**この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。
- ⚠ 注意：**この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

- 絵表示の例**
- ⓪ このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」です。
- ❗ このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

＜免責事項について＞

・地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。

・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

- ・当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・外観・仕様は製品の改良等により予告なしに変更される場合があります。ご了承下さい。

⚠ 危険

- ⓪ 下記のような医療用電子機器や家庭用電気治療器との併用は絶対にしないで下さい。また近くで絶対に使用しないで下さい。
- ・ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
 - ・人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
 - ・心電計などの装着型の医療用電子機器

医療用電子機器や家庭用電気治療器の誤作動を招くおそれがあります。

- ⓪ ・高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生するような場所、湿気の多い場所での使用や放置はしないで下さい。

発火・破裂・故障・火災の原因になります。

⚠ 警告

- ⓪ 取扱説明書上にある使用方法以外では、絶対に使用しないで下さい。

事故やトラブルのおそれがあります。

- ⓪ 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないで下さい。
- 破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

- ❗ ・絶対に改造、分解、修理しないで下さい。
- 発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

- ❗ ・別紙使用方法の使用時間を必ず守って下さい。
- 肌や身体のトラブルの原因になります。

⚠ 警告

- ❗ 次のような疾患のある方は医師と相談の上ご使用下さい。
- ・心臓疾患
 - ・有熱性疾患
 - ・急性疾患
 - ・感染症疾患
 - ・血圧異常
 - ・血友病疾患
 - ・悪性腫瘍
 - ・てんかん
 - ・糖尿病
 - ・結核性疾患、伝染性疾患、急性疾患（疼痛性）
 - ・レーシック手術を受けた方
 - ・骨粗しょう症の方
 - ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方

事故やトラブルのおそれがあります。

- ❗ 次のような方は絶対に使用しないで下さい。
- ・顔面の神経障害、皮膚知覚障害のある人
 - ・骨折・整形などで顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
 - ・交通事故などによる頭部および顔面に後遺症がある人
 - ・小児や成長期の子供、及びご自身で意思表示の出来ない人

事故やトラブルの原因になります。

- ・アレルギー体質の人、金属アレルギーのある人
- ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- ・敏感肌の人
- ・皮膚感覚の弱い人

肌や身体のトラブルの原因になります。

- ・妊娠中、授乳中、生理中、出産前後の人

ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。

- ❗ 下記のような場合や部位には使用しないでください。
- ・体調がすぐれない時や発熱時
 - ・飲酒後や薬を服用した時や疲労が激しい時
 - ・肌に傷や湿しん、はれもの、にきび、化膿性疾患のある場合およびその部位
 - ・当日、脱毛処理をした部位

⚠ 警告

- ・皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合およびその部位
- ・整形手術をした部位

肌や身体のトラブルの原因になります。

- ❗ ・子供の手の届くところでは絶対に使用しないで下さい。また置かないで下さい。
- ・使用中、肌や体に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談して下さい。
 - ・必ず痛くないレベルで使用して下さい。強すぎると接触部にトラブルを起こすおそれがあります。
 - ・使いはじめや敏感肌の方は、必ずお肌の様子をみながら使用して下さい。

事故やトラブルの原因になります。

⚠ 注意

- ⓪ ・装着部位に、けがや痛みがある場合には絶対に使用しないで下さい。

皮膚にトラブルを起こしたり、痛みを感じるおそれがあります。

- ⓪ ・長時間同じ箇所にヘッドをあて続けないで下さい。

皮膚にトラブルを起こしたり、痛みを感じるおそれがあります。

- ⓪ ・他の機器との併用は、絶対にしないで下さい。

事故やけがのおそれがあります。

- ⓪ ・眠りながら使用しないで下さい。

事故や体調不良をおこすおそれがあります。

- ⓪ ・運転しながら使用しないで下さい。

事故や体調不良をおこすおそれがあります。

⚠ 注意

- ⓪ ・本体を落としたりぶつけたりして破損したら、絶対に使用しないで下さい。

けがや故障のおそれがあります。

- ⓪ ・本体は絶対に濡らさないで下さい。

感電やショート、発火の原因となります。

- ⓪ ・本製品は一般家庭用なので、業務用として使わないで下さい。

事故やトラブルの原因になります。

- ❗ 必ず守って下さい。
- 電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- ・電池は⊕⊖極を確かめ正しく入れる。
 - ・使い切った電池は、すぐに取り出す。
 - ・長期間使用しないときは電池を取り出しておく。
 - ・使用推奨期限内の乾電池を使用する。
 - ・充電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と充電器の取扱説明書を読み、正しく使用する。

守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。

- ❗ ・使用中に身体に異常（めまい、冷や汗、吐き気、脈拍の乱れ、動悸など）を感じた時は、ただちに使用を中止して下さい。

事故や体調不良をおこすおそれがあります。

- ❗ ・本製品に水や他の液体をかけたり浸したりしないで下さい。風呂場等水分や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしないで下さい。

内部に水が入り、故障や火災、感電のおそれがあります。

- ❗ ・コンタクトレンズを使用の方は、必ずはずしてからご使用下さい。

目や皮膚を傷つけたり炎症などのおそれがあります。

⚠ 注意

- ❗ ・直射日光のあたる場所での使用や保管は絶対にしないで下さい。

故障や劣化のおそれがあります。

- ❗ ・使用するときは必ず、電源スイッチなど各機能が正常に作動することを確認してから使用して下さい。

守らないと事故やけがのおそれがあります。

- ❗ ・しばらく使用しなかった時は、製品が正常に作動することを確認してから使用して下さい。

守らないと事故やけがのおそれがあります。

- ❗ ・使用中に煙が出る、においがする、異常な音をする、発熱している等異常が起きたら直ちに電源を切り、使用を中止して下さい。

火災などの原因となります。

- ❗ ・本体は水洗いしないで下さい。使用後はやわらかい布かティッシュなどで拭きとり、清潔に保管してください。

内部に水が入り、故障や火災、感電のおそれがあります。

- ❗ ・高温多湿な環境ではご使用にならないで下さい。

故障や劣化のおそれがあります。

- ❗ ・つけまつげ、まつげエクステ、アイメイク等をしたまま使用しないで下さい。

目や皮膚を傷つけたり炎症などのおそれがあります。

- ❗ ・ピリピリと強い痛みを感じる場合は、お手持ちの化粧水またはゲル等を通常よりも多めにご使用することをおすすめします。
- それでも痛みを感じる場合は使用を中止して下さい。

肌や身体のトラブルの原因になります。