


mondiale

hand refle HR1

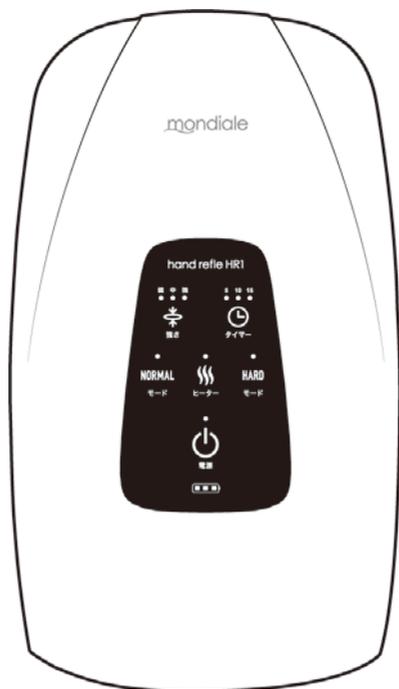

モンデール ハンドリフレ HR1

取扱説明書

ご使用前に本書を必ずお読みの上、正しく安全にご使用ください。
本書は大切に保管してください。

■ 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、貴方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠ 危険：この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠ 警告：この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 注意：この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

絵表示の例

⊘ このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

❗ このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

お読みになった後は、ご使用になる方が
いつでも見られるところに必ず保管してください。

<免責事項について>

- ・地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・外観・仕様は製品の改良等により予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

⚠ 危険

- ⊗ 次のような医療用電子機器や家庭用電気治療器との併用は絶対にしないでください。また近くで絶対に使用しないでください。
- ・ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器
 - ・人工心肺などの生命維持用電子機器
 - ・心電計などの装着型の医用電子機器

医療用電子機器や家庭用電気治療器の誤作動を招くおそれがあります。

- ⊗ ・高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
- ・電子レンジや高压容器などの中に、本体・及びACアダプターや付属する部品等を入れないでください。
 - ・火の中に投入したり、過熱したりしないでください。

発火・破裂・故障・火災の原因になります。

- ⊗ 接続端子をショートさせないでください。また接続端子に誘電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないでください。

火災や故障の原因になる場合があります。

- ⊗ ACアダプターをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のものを接触させないでください。

火災・感電・けが・故障の原因になります。

⚠ 警告

- ⊗ 取扱説明書上にある使用方法以外では、絶対に使用しないでください。

事故やトラブルのおそれがあります。

- ⊗ 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。

破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因になります。

- ⊗ 絶対に改造、分解、修理しないでください。

感電、事故および故障の原因になります。

- ⊗ 指定以外の電源電圧では使用しないでください。

火災や感電等の原因になります。

- ⊗ 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。

落雷による感電の原因になります。

⚠ 警 告

- ⊖ 濡れた手でACアダプターの抜き差しをしないでください。

感電のおそれがあります。

- ⊖ 子供の手の届くところでは絶対に使用しないでください。また置かないでください。

事故やトラブルのおそれがあります。

- ⊖ 次のような方は絶対に使用しないでください。

- ・製品使用部位に神経障害、皮膚知覚障害のある方
- ・骨折や整形などで製品使用部位にメタル、シリコン、プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方
- ・幼児や小さいお子様、およびご自身で意思表示のできない方

事故やトラブルのおそれがあります。

- ・製品使用部位に交通事故などによる後遺症がある方

症状が悪化するおそれがあります。

- ⊖ 次のような時は絶対に使用しないでください。

- ・体調がすぐれない時や発熱時
- ・飲酒後、薬を服用した時、疲労が激しい時
- ・製品使用部位にけがや痛みがある時
- ・就寝時

- ❗ 医師の治療を受けている時や次のような方は必ず医師と相談の上使用してください。

- ・心臓疾患・有熱性疾患・急性疾患・感染症疾患・血圧異常・血友病疾患
- ・悪性腫瘍・てんかん・骨粗しょう症・結核性疾患、伝染性疾患、急性疾患(疼痛性)
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の方
- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方

事故やトラブルのおそれがあります。

- ・製品使用部位に皮膚病(黒皮病、アトピー性皮膚炎、色素異常、その他皮膚疾患)のある方、またはあった方
- ・アレルギー体質の方
- ・敏感肌の方
- ・皮膚感覚の弱い方

肌や身体にトラブルをおこすおそれがあります。

- ❗
- ・使用中、肌や体に異常を感じたら、直ちに使用を中止し医師に相談してください。
 - ・必ず痛くないレベルで使用してください。強すぎると接触部にトラブルを起こすおそれがあります。
 - ・使いはじめや敏感肌の方は、必ずお肌の様子を見ながら使用してください。
 - ・使用時間は取扱説明書の指示を守ってください。

事故やトラブルのおそれがあります。

⚠ 警 告

- ❗ 必ず交流100Vで使用してください。

火災や感電の原因になります。

- ❗ ACアダプターの電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだACアダプター、ゆるんだコンセントは使用しないでください。また、ACアダプターの電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。

火災や感電・ショートの原因になります。

- ❗ お手入れをする時には必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

感電やショートの原因になります。

⚠ 注 意

- ⊗ 本体を使用中に他の作業をする場合は、周囲の状況等十分注意してご使用ください。また、車の運転や機械の操作等、危険をとまなう作業中には絶対に使用しないでください。

思わぬ事故につながります。

- ⊗ 眠りながら使用しないでください。

故障や事故、体調不良をおこすおそれがあります。

- ⊗ 他の機器との併用は、絶対にしないでください。

事故やけがのおそれがあります。

- ⊗ 本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しないでください。

事故やトラブルの原因になります。

- ⊗ 充電ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、ものを挟み込んだりしないでください。

火災や感電、ショート、やけどのおそれがあります。

- ⊗ 本体やACアダプターを落としたりぶつけたりして破損したら、絶対に使用しないでください。

けがや故障のおそれがあります。

- ⊗ 生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしないでください。生地が破損した場合は絶対に使用しないでください。

けがや故障の原因になります。

⚠ 注意

- ❌ コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。

たこ足配線等で定格を越えると発熱による火災の原因になります。

- ❌ 本体およびACアダプターや付属する部品は防水ではありません。水や他の液体をかけたたり浸したりしないでください。また、風呂場等水分や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしないでください。

内部に水が入り、故障や火災、感電のおそれがあります。

- ❌ エアバッグに故意に力を加えて無理に止めないでください。

けがや故障の原因になります。

- ❌ 直射日光のあたる場所での使用や保管は絶対にしないでください。

- ❌ 高温多湿な環境では使用しないでください。

故障や劣化のおそれがあります。

- ❌ 本製品は片手用です。両手を入れて使用しないでください。

事故やけが、本体破損の原因になります。

- ❌ つけ爪、過度なネイルアート、スカルプをご使用の方や、長い爪の方は使用しないでください。

けがや本体破損の原因になります。

- ❗ 1回の使用時間は15分以内とし、同一箇所への連続使用はおやめください。また、1日あたりの使用時間は通算して30分以内としてください。

過度な使用は必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因となります。

- ❗ 使用中に身体に異常（めまい、冷や汗、吐き気、脈拍の乱れ、動機など）を感じた時は、直ちに電源を切り使用を中止してください。

事故や体調不良をおこすおそれがあります。

- ❗ 使用する時は必ず、電源スイッチ、操作ボタン等各機能が正常に作動することを確認してから使用してください。

事故やけがのおそれがあります。

- ❗ 充電中は本体を平らな場所に水平に置いてください。また、充電中に使用する場合は本体を動かさないでください。

差込口がゆるみ途中で停止したり、故障の原因になります。

⚠ 注意

- ❗ ACアダプターをコンセントから抜く時は、充電ケーブルを持たずに必ずACアダプターを持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

- ❗ 使用中または充電中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱している等の異常が起きたら直ちに電源を切り、充電中の場合はACアダプターをコンセントから抜いてください。

火災などの原因になります。

- ❗ 充電中に停電が発生した場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

再通電された時事故の原因になります。

- ❗ ヒーターが熱いと感じた場合は、直ちに電源を切り使用を中止してください。

事故やけがのおそれがあります。

- ❗ エアバッグを痛めないため、過度な圧力をかけないように本体に手を入れた後に電源を入れてください。

故障の原因になります。

- ❗ 時計や指輪、ブレスレット等の装飾品は外してご使用ください。

皮膚を傷つけたり炎症する恐れがあります。


- ⚠ 使用後に手のひらにポイントの跡が残る場合がありますが、数分～数十分で元にもどります。（跡の消える時間には個人差があります。）

■ 製品特徴


モンデール ハンドリフレ HR1 は、“手から始まる癒しの時間”をテーマに、ハンドリフレクソロジーを応用した健康美をサポートするヒーリング機器です。マイクロコンピュータチップを搭載し、エアプレッシャーを的確に制御する事で、手のまわりに適度な圧迫や刺激を与え、快適なリラクゼーションをお楽しみいただけます。

■ 製品内容


本製品には、本体、充電ケーブル、ACアダプター、取扱説明書（本書）が同梱されております。

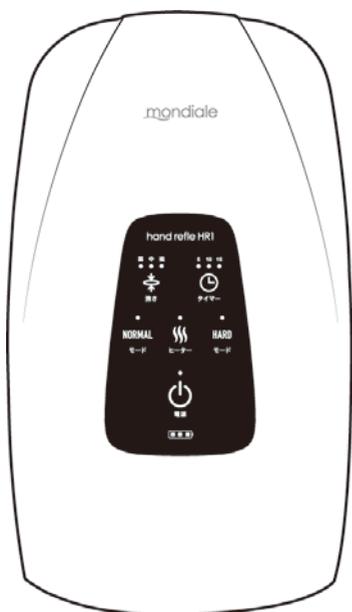

本体

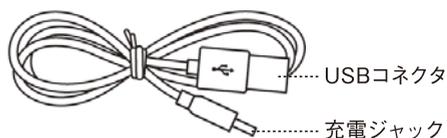

充電ケーブル

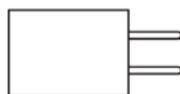


ACアダプター



取扱説明書（本書）

■ 各部の名前と機能

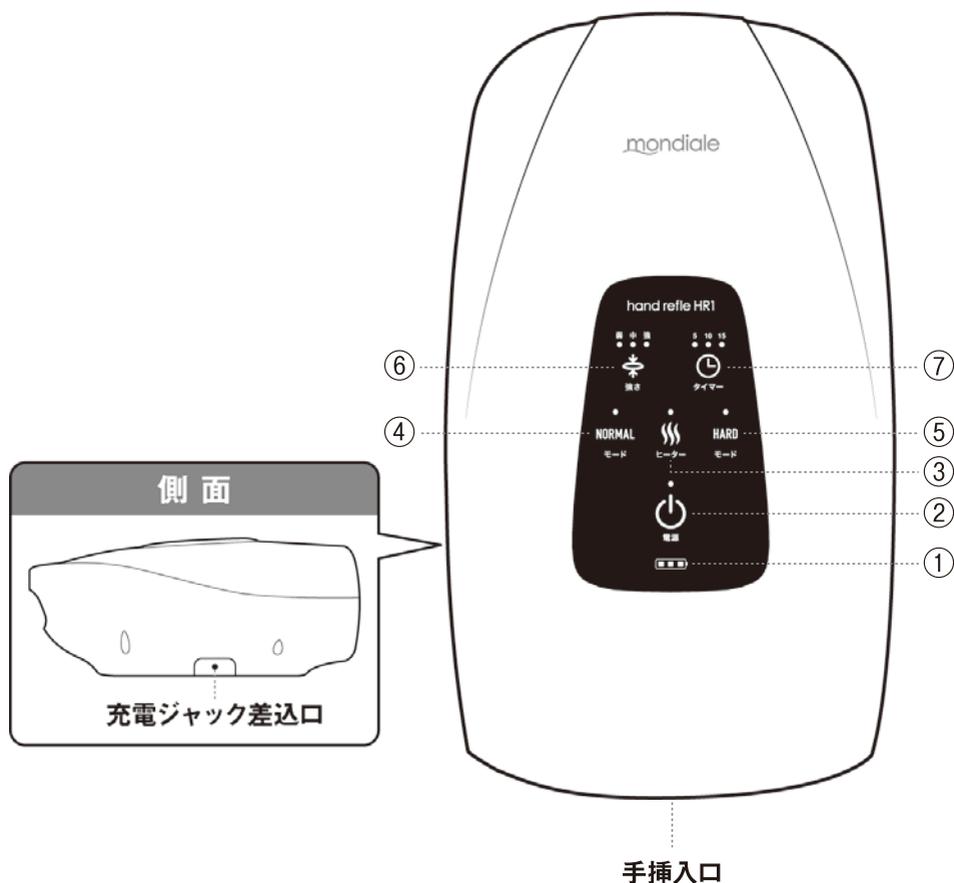

① 残量表示ランプ:

バッテリーの残量目安を4段階でお知らせします。

3個点灯…満充電 2個点灯…残量中 1個点灯…残量小 1個点滅…残量なし

② 電源ボタン: 電源のオン/オフを行います。

③ ヒーターボタン: ヒーターのオン/オフを行います。

④ ノーマルモードボタン: 適度な刺激を与えるモードです。


⑤ ハードモードボタン: 強めの刺激を与えるモードです。

⑥ 強さ切り替えボタン: ボタンを押すたびにエアアの強さが、弱・中・強に切り替わります。(初期設定:弱)

⑦ タイマー切り替えボタン: ボタンを押すたびに設定時間が、5分・10分・15分に切り替わります。(初期設定:5分)

■ ご使用の前に〈充電の仕方〉

1. 充電ケーブルの充電ジャックを本体の充電ジャック差込口に差し込みます。
2. 充電ケーブルのUSBコネクタをACアダプターに差し込みます。
※付属のACアダプター以外でも5V 2A出力に対応したACアダプターや、USBポートであれば使用可能です。
3. ACアダプターをコンセントに差し込みます。
 - ・充電中は残量表示ランプが点滅し、充電が完了すると点灯に変わります。
 - ・満充電までの所要時間は約3時間です。
※充電環境等により充電時間は前後します。
※電池の残量によって充電時間が短くなる場合があります。
 - ・満充電の状態ですら約2時間ご使用になれます。(15分の使用で約8回)
※1回の使用時間は15分以内とし、同一箇所への連続使用はおやめください。
 - ・充電中も本体操作ができます。

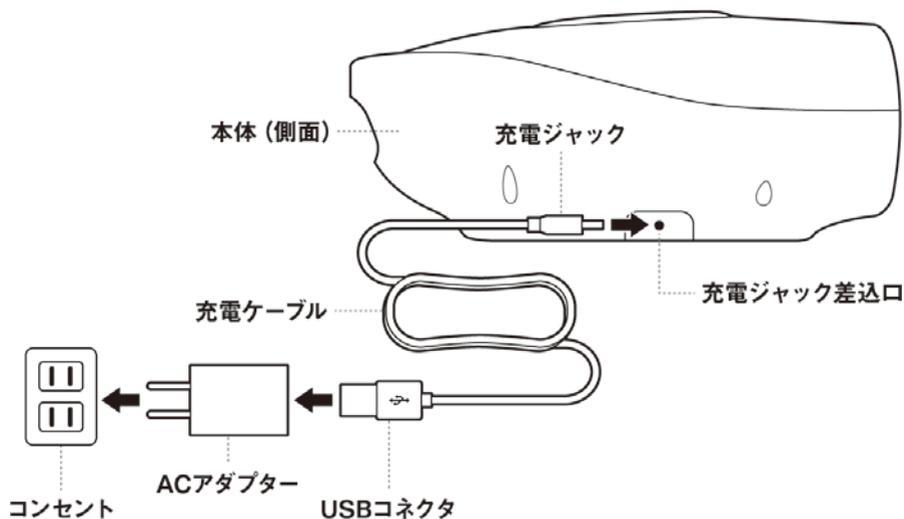

バッテリーの残量目安を4段階でお知らせします。
本体の残量表示ランプをご確認ください。

3個点灯 

満充電

2個点灯 

残量中

1個点灯 

残量少

1個点滅 

残量なし

4. 充電完了後はACアダプターをコンセントから抜いてください。

■ ご使用方法

1. 本体に片手を差し込みます。

本体下部にある丸いふくらみに、手のひらの中央を合わせて置いてください。



2. 電源ボタン を押します。


3. ノーマルモード **NORMAL** かハードモード **HARD** のどちらかを選んでボタンを押すと、運転が開始します。

※電源ボタンを押した後、モードボタンを押さずにいると、約5秒後に自動的に電源が切れます。

4. お好みでエアーの強さ、作動時間、ヒーターのオン/オフを選びます。


● エアーの強さを選択する場合

強さ切り替えボタン  を押すたびに強さが切り替わります。(初期設定:弱)

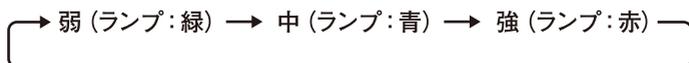

● 作動時間を選択する場合

タイマー切り替えボタン  を押すたびに設定時間が切り替わります。(初期設定:5分)

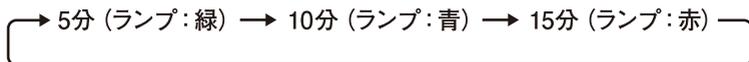

● ヒーターのオン/オフを選択する場合

ヒーターボタン  を押してオン/オフを選択してください。ヒーターがオンの時は、ランプが点灯します。(初期設定:オフ)

5. 途中で運転を止める場合は電源ボタン を押してください。

注意

使用后、数秒でエアーが抜けます。
完全にエアーが抜けてから手を引き出してください。

■ お手入れ方法

- ・必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。
- ・水洗いは出来ません。お手入れする時は乾いたやわらかい布で拭いてください。本体についた汚れは、水でかるく湿らせたやわらかい布で拭き取ってください。

■ 充電式電池について

- ・充電式電池は消耗品です。充電を繰り返すと、使用できる時間が少しずつ短くなります。
- ・電池の特性上、初めてお使いの時や半年以上使わなかった時は電池の性能が低下している場合がございます。半年以上使用されない場合は電池が劣化します。半年に一度は満充電してください。
- ・周囲の温度が高すぎたり、低すぎたりすると、充電効率が悪く充電できない場合があります。また、電池が劣化する原因にもなります。
- ・充電電池の寿命は使用状況、保管方法などの状態により大きく変化します。

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。本製品を破棄される場合は、自治体の分別ルールに従って破棄してください。



■ 充電式電池の交換について

- ・充電式電池はご自分で交換できません。交換したい場合は、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。

■ トラブルシューティング

不具合の際は下記の手順で確認してください。

問題	考えられる理由	対応(解決法)
電源ボタンを押しても 運転しない	モードボタンを押していない	電源ボタンを押した後、 5秒以内にモードボタンを押してください
	本体の充電が切れています	充電してください
使用中に停止する	本体の充電が切れています	充電してください
	タイマーが終わると自動停止します	異常ではありません
満充電しても数分しか 作動しない	充電式電池の寿命	充電式電池を交換してください
動作中に音がする	異常ではありません	本体は構造上、ある程度の動作音がします 異常ではありません

長年ご使用のハンドリフレは点検を

このような症状はありませんか？

- ・煙が出たり、異常なおいや音がする
- ・充電ケーブル、ACアダプターが異常に熱い
- ・ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体内側の布地に破れなどがある
- ・その他異常がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ずお買い上げの販売店または販売元に点検・修理をご相談ください。

■ 仕様

- 【電源方法】充電式(リチウムイオン電池内蔵)
- 【定 格】《電源》DC5V 2A 消費電力 7.5W
《ACアダプター》AC100-240V 50/60Hz
- 【作 動 時 間】5分、10分、15分 任意設定可能
- 【ヒーター最高温度】約 45℃以下
- 【本 体 サ イ ズ】(約)幅 150×奥行 250×高さ 108mm
- 【本 体 重 量】約 750g
- 【本 体 材 質】ABS

■ 保証とアフターサービス

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。修理・交換に際しましては必ず保証書をご提示ください。詳細は下記保証規定をご参照ください。

※保証書は箱の内蓋部分にあります。

保証規定 持込修理

1. 取扱説明書の記事内容に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、お買い上げ日から一年以内は無料で修理・交換いたします。
(分解されていない場合に限りです)
2. 修理ご依頼品の発送料および諸経費はお客様のご負担になります。
※ご送付される場合、傷が付かないように柔らかい紙や布で包んで箱などに入れてください。
3. 保証期間中はご購入元にご連絡の上、商品をご送送ください。保証の規定に従って対応させていただきます。
4. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - イ. 保証書の提示がない場合。または保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入、指定のプロダクトIDシールの貼付がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ロ. お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障および損傷
 - ハ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ニ. 使用中に生じたキズ、汚れ等外観上の変化
 - ホ. 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧、盗難等による故障および損傷
 - ヘ. 落下等不注意、ならびに乱暴な扱いによる故障および損傷
 - ト. 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
 - チ. 一般家庭以外(たとえば業務用等)に使用された場合の故障および損傷
5. 本体以外の付属品は保証の対象外です。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。